



[EN] Consumer information

Stratacel is an advanced flexible film forming wound dressing for the repair of damaged or compromised skin following fractional skin injuries.

Stratacel is a gel, making it easy to apply to large exposed surface areas and contoured skin, like the face, neck and chest.

When used as directed Stratacel dries to form a protective layer that is gas permeable and waterproof which hydrates and protects compromised skin areas and superficial wounds from chemical and microbial invasion.

Intended use

Stratacel can be applied to open wounds and areas where skin integrity has been compromised.

Stratacel is used to relieve itching and discomfort, and to reduce redness and discoloration associated with damaged skin.

Stratacel was developed to be used as a wound dressing for the repair of damaged or compromised skin.

Stratacel can be used in post cosmetic procedures such as:

- Laser procedures (fractional)
- Chemical peel (superficial)
- Tattoo removal (fractional)
- Microblading
- Microneedling
- Radiofrequency (fractional)
- Vaginal rejuvenation
- Other fractional devices

Stratacel can be used post medical procedures such as:

- Cryosurgery (actinic keratosis)
- Post 5-FU therapy
- Medical tattooing (i.e. post breast reconstruction)
- inflammatory skin alterations
- 1st and 2nd degree burns (with epidermis)

Stratacel can be used with or without a secondary protective dressing.

Stratacel may also be used in conjunction with other adjunctive treatments to improve overall results.

Stratacel contains no alcohols, parabens or fragrances, and is transparent and odorless making it suitable for everyone including people with sensitive skin.

Stratacel may be used during pregnancy and while breastfeeding.

How Stratacel works

When you have undergone any of the procedures mentioned above, the outer layer of your skin (epidermis) has been damaged. This outermost layer (stratum corneum) acts as the protective barrier of the epidermis. When this barrier is broken, water can evaporate more easily. It can no longer protect the skin from the environment which may cause dryness, itching, redness, discomfort, infection and increases the risk of abnormal scarring.

Stratacel dries and recreates a barrier to stop the evaporation of water and the risk of external contamination. This newly created protective layer is gas permeable and waterproof, but does not adhere strongly to the wound bed or the newly formed granulating tissue.


Stratacel helps to promote a moist wound healing environment for compromised skin areas, superficial wounds and burns.

This environment leads to faster re-epithelialization and a reduced inflammatory response, which decreases the recovery time post-procedure.

Directions for use

On first use of 10g and 20g tubes remove the cap, cut the nozzle tip of the tube and close with the cap after use.

On 50g tubes remove the cap, then the protective seal and close with the cap after use.

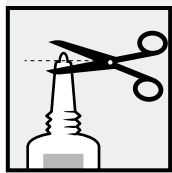

Ensure that the affected skin or superficial wound is clean. Gently pat dry as much excess exudate or wound fluid from the area as possible prior to the gel application. Apply a very thin layer of Stratacel directly to the affected area and allow the gel to dry. Stratacel should dry in 5-6 minutes.

If it takes longer to dry you have probably applied too much. Gently remove the excess with a clean tissue or gauze and allow the drying process to continue. If a secondary dressing is used, drying time is not necessary. Once dry, Stratacel may be covered by sunscreen, cosmetics or clothing.

Stratacel should be applied once daily, or twice daily to exposed areas or as advised by your physician.

For best results Stratacel should be in continuous contact with the skin (24 hours a day / 7 days a week).

Stratacel is intended for single patient use.

Recommended duration of treatment

Stratacel is recommended as immediate post-procedure treatment and should be continued until the skin has fully recovered.

For resurfacing and ablative procedures, continued use is recommended for a minimum treatment of 30 days (24 hours a day / 7 days a week) or until no further improvement is seen.

How much Stratacel do I need?

Stratacel gel is a unique formulation which requires substantially less product per application than typical moisturizing creams or barrier ointments.

- **Stratacel 10g (0.35 oz)** is enough to treat an area of 6 x 6 cm (2.5 x 2.5 inch) twice per day for over 60 days.
- **Stratacel 20g (0.7 oz)** is enough to treat an area of 6 x 12 cm (2.5 x 5 inch) twice per day for over 60 days.
- **Stratacel 50g (1.75 oz)** is enough to treat an area of 12 x 15 cm (5 x 6 inch), twice per day for over 60 days.

Caution

- For external use only.
- Stratacel should not be placed in contact with the eyes.
- Stratacel should not be applied over topical medications unless advised by your physician.
- Stratacel may stain clothing if not completely dry.
- If staining occurs, dry cleaning should be able to remove it without damaging the fabric.
- For correct storage please reclose the tube tightly with the cap.
- Should your wound show signs of infection or fail to heal after 30 days of initial product application consult your physician.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Not suitable for highly exudative wounds, tunneling wounds or 3rd degree burns.
- Keep out of the reach of children.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the tube. The expiration (EXP) date does not change once the tube has been opened.
- Do not use if the tube is damaged.

STERILE UNTIL OPENED

Ingredients: Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicones

[DE] Verbraucherinformation

Stratacel ist eine innovative, flexible und filmbildende Wundauflage zur Wiederherstellung von geschädigter und geschwächter Haut nach fraktionierten Hautverletzungen.

Aufgrund der Gel-Konsistenz kann Stratacel einfach auf große, exponierte und unebene Hautflächen, wie das Gesicht, den Hals und die Brust aufgetragen werden.

Bei ordnungsgemäßer Anwendung bildet Stratacel beim Trocknen eine Schutzschicht, die sowohl gasdurchlässig als auch wasserundurchlässig ist.

Geschwächte Hautpartien und oberflächliche Wunden werden dadurch mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig vor chemischen und mikrobiellen Verunreinigungen geschützt.

Anwendungszweck

Stratacel kann auf offene Wunden und Stellen mit geschwächter Hautintegrität aufgetragen werden.

Stratacel mildert Juckreiz sowie Unbehagen, und reduziert Rötungen und Verfärbungen geschädigter Haut.

Stratacel wurde für den Gebrauch als Wundauflage zur Wiederherstellung von geschädigter und geschwächter Haut entwickelt.

Stratacel kann nach folgenden kosmetischen Behandlungen verwendet werden:

- Laserbehandlungen (fraktioniert)
- Chemischen Peelings (oberflächlich)
- Tattoorentfernungen (fraktioniert)
- Microblading
- Microneedling
- Radiofrequenzablationen (fraktioniert)
- Vaginalverjüngungen
- Andere fraktionierte Behandlungen

Stratacel kann nach folgenden medizinischen Behandlungen verwendet werden:

- Kryochirurgie (aktinische Keratose)
- Nach einer 5-FU Therapie
- Medizinische Tätowierung (z.B. nach einer Brustrekonstruktion)
- Entzündeten Hautveränderungen
- Verbrennungen ersten und zweiten Grades (mit noch vorhandener Epidermis)

Stratacel kann mit oder ohne Sekundärschutzverband verwendet werden.

Stratacel kann auch in Verbindung mit anderen begleitenden Behandlungen verwendet werden um das Endresultat zu verbessern.

Stratacel enthält weder Alkohol, noch Duftzusätze oder Parabene. Somit ist die Anwendung für alle Personen, inklusive jener mit empfindlicher Haut, geeignet.

Stratacel kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden.

Wie Stratacel wirkt

Alle oben genannten Eingriffe beschädigen die äußere Hautschicht (Epidermis). Die äußerste Schicht (Stratum corneum) fungiert als Schutzschicht für die Epidermis. Wenn diese Schicht verletzt ist, kann Wasser einfacher aus der Haut entweichen. Sie kann die Haut nicht mehr vor Umwelteinflüssen schützen, was zu Trockenheit, Juckreiz, Rötungen und Unbehagen sowie einem erhöhten Risiko abnormale Narben zu entwickeln führen kann.

Stratacel stellt wieder eine Schutzschicht her um das Entweichen des Wassers zu unterbinden und das Risiko für externe Verunreinigungen zu minimieren. Diese neue, schützende Schicht ist sowohl gasdurchlässig als auch wasserundurchlässig. Sie haftet nur leicht am Wundbett bzw. dem neu gebildeten Granulationsgewebe an.

An Stellen mit geschwächter Hautintegrität, oberflächlichen Wunden und Verbrennungen fördert Stratacel


eine feuchte Wundheilungsumgebung.

Diese feuchte Wundheilungsumgebung fördert eine schnellere Re-Epithelisierung* und reduziert die akute Entzündungsreaktion, was die Genesungszeit verkürzt.

Anwendungshinweise

Bei der ersten Benutzung der 10g oder 20g Tube: Den Verschluss entfernen und die Tubenspitze abschneiden. Nach dem Gebrauch die Tube wieder verschließen.

Bei der ersten Benutzung der 50g Tube: Den Verschluss entfernen und die Schutzfolie abziehen. Nach dem Gebrauch die Tube wieder verschließen.

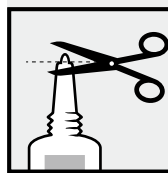

Es muss sichergestellt werden, dass die betroffene Hautstelle oder oberflächliche Wunde sauber und trocken ist. Entfernen Sie vorsichtig soviel überschüssiges Exsudat oder Wundflüssigkeit wie möglich bevor Sie das Gel auftragen. Tragen Sie eine sehr dünne Schicht Stratacel auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie das Gel trocknen. Stratacel sollte innerhalb von 5 bis 6 Minuten getrocknet sein.

Sollte das Trocknen länger dauern, haben Sie wahrscheinlich zu viel Gel aufgetragen. Den Überschuss vorsichtig mit einem sauberen Tuch oder Gazestück abtupfen und das verbleibende Gel weiter trocknen lassen. Nach dem Trocknen können über die Stratacel-Schicht Sonnencremes oder Kosmetika aufgetragen werden sowie Kleidung angelegt werden.

Soweit von Ihrem Arzt nicht anders verordnet, sollte Stratacel einmal täglich oder zweimal täglich auf exponierte Stellen aufgetragen werden.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn Stratacel dauerhaft mit der Haut in Kontakt ist (24h/Tag; 7 Tage/Woche).

Eine Tube Stratacel sollte nur für einen Patienten verwendet werden.

Empfohlene Anwendungsdauer

Stratacel sollte unmittelbar nach der Behandlung und bis zur vollständigen Abheilung der Haut verwendet werden.

Für Resurfacing und ablative Behandlungen wird eine minimale Verwendungsdauer von 30 Tagen (24h/Tag; 7 Tage/Woche) empfohlen, oder bis keine weitere Verbesserung beobachtet wird.

Wieviel Stratacel wird benötigt?

Stratacel ist eine einzigartige Rezeptur, welche erheblich weniger Produkt pro Anwendung benötigt als typische Feuchtigkeitscremes oder Salben.

- **Stratacel 10g** ist ausreichend, um eine Fläche von 6 x 6 cm zweimal täglich während 60 Tagen zu behandeln.
- **Stratacel 20g** ist ausreichend, um eine Fläche von 6 x 12 cm zweimal täglich während 60 Tagen zu behandeln.
- **Stratacel 50g** ist ausreichend, um eine Fläche von 12 x 15 cm zweimal täglich während 60 Tagen zu behandeln.

Warnhinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung
- Stratacel darf nicht mit den Augen in Kontakt gebracht werden.
- Stratacel sollte nicht über andere topische Mittel aufgetragen werden, außer sie sind von Ihrem Arzt verordnet.
- Wenn Stratacel noch nicht vollständig getrocknet ist, können Flecken auf der Kleidung entstehen. Im Falle einer Verunreinigung, entfernt eine chemische Reinigung die Flecken ohne den Stoff zu beschädigen.
- Für eine korrekte Aufbewahrung die Tube fest mit der Verschlusskappe verschließen.
- Sollte Ihre Wunde Infektionszeichen aufweisen oder 30 Tage nach der Erstverwendung nicht heilen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt.
- Sollten Hautreizungen auftreten, brechen Sie die Anwendung ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nicht geeignet bei hochexsudativen, tunnelförmigen Wunden oder Verbrennungen dritten Grades.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Produkt nicht nach Ablauf des ab der Tube aufgedruckten Verfallsdatums (EXP) verwenden. Das Verfallsdatum ändert sich nach dem Öffnen der Tube nicht.
- Nicht verwenden, wenn die Tube beschädigt ist.

STERIL WENN UNGEÖFFNET

Wirkstoffe: Polydimethylsiloxane, Siloxane, Alkyl-, Methylsilikone

[FR] Information patient

Stratacel est un pansement filmogène innovant indiqué dans la prise en charge des effets secondaires cutanés provoqués par une thérapie fractionnée.

Stratacel est un gel adapté pour une utilisation sur de larges surfaces et/ou des zones en relief comme le visage, le cou ou le torse.

Stratacel sèche en formant une couche protectrice, perméable aux gaz et imperméable à l'eau, favorisant une hydratation naturelle. Cette couche protège la peau lésée de toute contamination chimique et/ou microbienne.

Indications

Stratacel est indiqué dans la prise en charge des plaies ouvertes et des peaux lésées.

Stratacel soulage les démangeaisons, la sensation d'inconfort, et atténue rougeurs et décolorations symptomatiques des peaux lésées.

Stratacel a été développé comme un pansement pour la cicatrisation des peaux lésées.

Stratacel est indiqué dans la prise en charge post-opératoire des actes cosmétiques :

- Laser (fractionné)
- Peeling chimique (superficiel)
- Détatouage
- Microblading
- Microneedling
- Radiofréquence (fractionnée)
- Rajeunissement vaginal
- Autres thérapies fractionnées

Stratacel est également indiqué dans la prise en charge post-opératoire des actes médicaux :

- Cryochirurgie (kératose actinique)
- Post thérapie par fluorouracil (5-FU)
- Tatouage médical (ex. reconstruction mammaire)
- Altération cutanée d'origine inflammatoire
- Brûlures du 1^{er} et 2nd degré

Stratacel peut être recouvert d'un pansement secondaire. Stratacel peut être utilisé avec d'autres traitements concomitants.

Stratacel ne contient pas d'alcool, de parabène, ou de parfum. Il convient aux personnes à la peau sensible. Stratacel est transparent et inodore.

Stratacel peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Mode d'action de Stratacel

Après tous actes cosmétiques ou médicaux cités ci-dessus, la couche externe de la peau (épiderme) est endommagée. La couche la plus externe de l'épiderme, appelée stratum corneum, sert de barrière protectrice. Lorsque celle-ci est endommagée l'eau s'évapore plus facilement, pouvant entraîner une sécheresse cutanée, des démangeaisons, des rougeurs, une sensation d'inconfort, mais également un risque d'infection et de mauvaise cicatrisation.

En séchant Stratacel recrée cette barrière réduisant le déséquilibre hydrique et diminuant le risque de contamination extérieure, tout en permettant les échanges gazeux et en préservant l'imperméabilité. Stratacel n'adhère que légèrement au lit de la plaie et aux nouveaux tissus cutanés formés.


Stratacel contribue à former un environnement humide propice à la cicatrisation des plaies superficielles, des lésions cutanées et des brûlures.

Cet environnement permet une épithélialisation* rapide et une réduction des signes inflammatoires, diminuant le temps de cicatrisation post-opératoire.

Mode d'emploi

Lors de la première utilisation d'un tube de 10 g et 20 g, dévisser le bouchon, couper l'embout du tube. Refermer le tube après chaque utilisation.

Lors de la première utilisation d'un tube de 50g, dévisser le bouchon et retirer l'opercule protecteur. Refermer le tube après chaque utilisation.

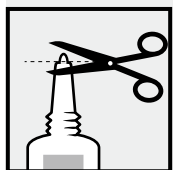

Avant chaque application s'assurer que la plaie ou la zone à traiter est propre. Avant d'appliquer le gel, tamponner délicatement la plaie pour éliminer tout surplus d'exsudat. Appliquer une fine couche de Stratacel sur la zone à traiter puis laisser sécher 5-6 minutes.

Si le temps de séchage est plus long, c'est que vous avez appliqué trop de produit. A l'aide d'un linge propre ou d'une compresse, retirez délicatement l'excès et laissez sécher de nouveau. En cas d'utilisation d'un pansement secondaire, aucun temps de séchage n'est nécessaire.

Une fois sec, Stratacel peut être recouvert de crème solaire, de produits cosmétiques ou d'un vêtement.

Renouveler l'application de Stratacel une à deux fois par jour ou selon les recommandations de votre médecin.

Pour un résultat optimal, Stratacel doit rester en contact continu avec la peau (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Chaque tube de Stratacel est à usage individuel.

Durée de traitement recommandée

Il est conseillé d'appliquer Stratacel immédiatement après l'intervention et jusqu'à guérison complète.

Pour les procédures de surfaçages ou les traitements ablatifs, il est recommandé d'appliquer Stratacel pendant une durée minimale de 30 jours (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7). Si aucune amélioration ultérieure n'est constatée, l'arrêt du traitement est envisageable.

Choisir son tube de Stratacel dans la gamme en fonction de vos besoins.

La formulation unique de Stratacel permet, pour une même surface, d'appliquer moins de produit par rapport à une crème hydratante ou une pommade cicatrisante traditionnelle.

- **Stratacel 10g** permet de traiter une surface de 6 x 6 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 60 jours.
- **Stratacel 20g** permet de traiter une surface de 6 x 12 cm, à raison de deux applications par jour pendant une durée minimum de 60 jours.
- **Stratacel 50g** permet de traiter une surface de 12 x 15 cm, à raison de deux applications par jour une durée minimum de 60 jours.

Mise en garde

- Destiné uniquement à un usage externe.
- Stratacel ne doit pas entrer en contact avec les yeux.
- Stratacel ne peut être appliqué sur un autre traitement cutané sans un avis médical préalable.
- Le séchage incomplet de Stratacel est susceptible de tacher les vêtements. Dans ce cas un nettoyage à sec permettra de retirer les taches sans endommager les vêtements.
- Pour une meilleure conservation, bien refermer le tube après chaque utilisation.
- Si la plaie semble s'infecter ou ne pas guérir sous 30 jours de traitement, consulter un médecin.
- En cas de démangeaison, interrompre le traitement et consulter votre médecin traitant.
- Ne convient pas pour les plaies très exsudatives, béantes ou les brûlures du 3^{ème} degré.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) qui figure sur le tube. Une fois le tube ouvert, la date d'expiration (EXP) n'est pas modifiée.
- Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

STÉRILE JUSQU'À OUVREURE

Ingrédients : Polydimethylsiloxanes, siloxanes, alkylmethyl silicoles

[IT] Informazioni per il consumatore

Stratacel è una medicazione avanzata che forma un film flessibile indicata per la riparazione della pelle danneggiata o compromessa da trattamenti frazionali.

Stratacel si presenta in forma di gel, in modo da semplificare l'applicazione su superfici ampie e irregolari come viso, collo e torace.

Se utilizzato secondo le istruzioni, Stratacel si asciuga in modo da formare uno strato protettivo gas permeabile e resistente all'acqua che idrata e protegge da agenti chimici e batterici le aree cutanee compromesse e le ferite aperte.

Uso previsto

Stratacel può essere applicato su ferite aperte e su aree in cui è stata compromessa l'integrità cutanea.

Stratacel è utilizzato per alleviare il prurito e il fastidio, come pure ridurre l'arrossamento e lo scolorimento associati alla cute danneggiata.

Stratacel è stato sviluppato per essere utilizzato come medicazione per la riparazione della cute danneggiata o compromessa.

Stratacel può essere impiegato in procedure cosmetiche/estetiche quali:

- Procedure laser (frazionato)
- Peeling chimici (superficiali)
- Rimozione di tatuaggi (frazionato)
- Microblading
- Microneedling
- Radiofrequenza (frazionale)
- Ringiovanimento vaginale
- Altri dispositivi frazionali

Stratacel può essere utilizzato dopo procedure mediche quali:

- Criochirurgia (cheratosi attiniche)
- Terapia post 5-FU
- Tatuaggi medicali (p.es. dopo ricostruzioni mammarie)
- Alterazioni infiammatorie della pelle
- Ustioni di 1° e 2° grado (con epidermide)

Stratacel può essere utilizzato con o senza una medicazione secondaria protettiva.

Stratacel può essere utilizzato in combinazione ad altri trattamenti per migliorare il risultato complessivo.

Stratacel non contiene alcool, parabeni o profumi, è trasparente e inodore e indicato per tutti i tipi di pelle, compresi i pazienti con pelle sensibile.

Stratacel può essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento.

Come funziona Stratacel

Quando si esegue una delle procedure sopra menzionate, lo strato più esterno della pelle viene danneggiato. Questo strato più esterno (strato corneo) funge da barriera protettiva dell'epidermide. Quando questa barriera è compromessa l'acqua può evaporare più facilmente. Non può più proteggere la pelle dall'ambiente esterno e può causare, secchezza, prurito, arrossamento, disagio, infezioni e innalzare il rischio di cicatrici anomale.

Stratacel asciugandosi, crea una barriera per fermare l'evaporazione dell'acqua e il rischio di contaminazione esterna. Questo nuovo strato protettivo è gas permeabile e impermeabile all'acqua, ma non aderisce in modo forte al letto della ferita o al tessuto granuloso neoformato.


Stratacel aiuta a promuovere un ambiente umido adatto alla guarigione delle ferite in aree cutanee compromesse, ferite superficiali e ustioni.

Questo tipo di ambiente favorisce una più rapida riepitizzazione* e riduce la risposta infiammatoria, diminuendo i tempi di recupero post-trattamento.

Istruzioni per l'uso

Al primo utilizzo del tubetto da 10g e 20g rimuovere il tappo, tagliare la punta del tubetto e richiudere con il tappo dopo l'uso.

Per i tubetti da 50g togliere il tappo, poi il sigillo di protezione e richiudere con il tappo dopo l'uso.

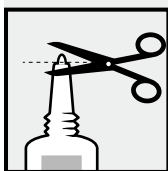

Assicurarsi che l'area epidemica interessata o la ferita superficiale sia pulita. Tamponare delicatamente il più possibile l'essudato in eccesso o il fluido della ferita dalla zona interessata prima di applicare il gel. Applicare uno strato molto sottile di Stratacel direttamente sulla zona interessata e attendere che il gel si sia asciugato. Stratacel asciuga in 5-6 minuti.

Se impiega più tempo ad asciugare, ne è stato probabilmente applicata una quantità eccessiva. Rimuovere delicatamente la quantità in eccesso con una garza pulita lasciando continuare il processo di asciugatura.

Se viene utilizzata una medicazione secondaria non è necessario attendere l'asciugatura. Una volta asciutto, Stratacel può essere coperto da crema con protezione solare, cosmetici o vestiti.

Si consiglia l'applicazione di Stratacel una volta al giorno o 2 volte al giorno nelle aree esposte o come consigliato dal medico.

Per ottenere i risultati migliori si consiglia di mantenere Stratacel in continuo contatto con la pelle (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana).

Stratacel è destinato all'uso su un singolo paziente.

Durata raccomandata del trattamento

Stratacel è raccomandato per il trattamento immediato post-procedura e deve essere continuato fino a quando la pelle è completamente recuperata.

Per le procedure di resurfacing e ablativo, l'uso continuato è raccomandato per un minimo di 30 giorni (24 ore al giorno/7 giorni alla settimana) o fino a quando non si riscontrino ulteriori miglioramenti.

Quanto Stratacel va applicato?

Stratacel gel è una formulazione unica che richiede meno prodotto per applicazione rispetto alle tipiche creme idratanti o agli unguenti barriera.

- **Stratacel 10g** è sufficiente a trattare un'area di 6 x 6 cm due volte al giorno per un periodo di oltre 60 giorni.
- **Stratacel 20g** è sufficiente a trattare un'area di 6 x 12 cm due volte al giorno per un periodo di oltre 60 giorni.
- **Stratacel 50g** è sufficiente a trattare un'area di 12 x 15 cm due volte al giorno per oltre 60 giorni.

Avvertenze

- Solo per uso esterno.
- Stratacel non deve entrare in contatto con gli occhi.
- Stratacel non deve essere applicato su altri farmaci topici senza il parere del medico.
- Stratacel può macchiare i vestiti, se non completamente asciutto. In caso di macchia, il lavaggio a secco dovrebbe essere in grado di rimuoverlo senza danneggiare il tessuto.
- Per una corretta conservazione, richiudere bene il tubetto con il tappo.
- Nel caso la ferita mostrasse segni di infezione o non guarisse entro 30 giorni dall'inizio dell'applicazione del prodotto, consultare il medico.
- In caso di irritazione, interrompere l'uso e consultare il medico.
- Non adatto a ferite altamente essudative, sottocutanee o ustioni di 3° grado.
- Tenere fuori della portata dei bambini.
- Non usare dopo la data di scadenza (EXP) stampata sul tubetto. La data di scadenza non cambia una volta che il tubetto è stato aperto.
- Non utilizzare se il tubetto è danneggiato.

STERILE FINO ALL'APERTURA

Ingrédients : Polidimetilsilossani, silossani, alchilmethyl siliconi

	Consult instructions for use Gebrauchsanweisung beachten Respecter le mode d'emploi Consultare le istruzioni per l'uso
	Use by date Verfallsdatum Date limite d'utilisation Utilizzare entro
LOT	Batch code Seriennummer Número de lot Codice di lotto
STERILE R	Sterilized using irradiation Durch Bestrahlung sterilisiert Stérilisation par irradiation Sterilizzato con radiazioni

Stratapharma AG
Aeschenvorstadt 57
CH-4051 Basel
Switzerland / Schweiz / Suisse / Svizzera

Date of preparation of this information
Erstellungsdatum der Informationen
Date de préparation de ces informations
Data di revisione del testo
03/2018

* Losi P et al. J mater Med; 2012;23 (9):2235-43